

# Κυψελίδες UriSed

REF

URS-9961HU  
URS-9961-1  
URS-9971  
URS-9972  
URS-9974  
URS-9961CH-1  
URS-9971CH

## Οδηγίες χρήσης

### Προβλεπόμενη χρήση:

Οι κυψελίδες UriSed είναι αναλώσιμα, μίας χρήσης δοχεία συλλογής δειγμάτων από πολυανθρακικό υλικό, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση μη φυγοκεντρισμένων δειγμάτων ανθρώπινων ούρων με τους αναλυτές ιζήματος UriSed. Προορίζονται για επαγγελματική, εργαστηριακή χρήση. Προορίζονται για in vitro διαγνωστική χρήση.

### Αρχή της δοκιμασίας:

Οι κυψελίδες UriSed είναι δοχεία συλλογής δειγμάτων που επιτρέπουν τη μικροσκοπική ανάλυση δειγμάτων ούρων.

### Παρεχόμενα υλικά:

600 κυψελίδες σε 12 βάσεις κυψελίδων με 50 κυψελίδες η καθεμία

### Μη παρεχόμενα υλικά:

- Συμβατός αναλυτής ιζήματος ούρων (UriSed, UriSed2, UriSed 3, UriSed 3 PRO, UriSed mini)
- Γενικός εργαστηριακός εξοπλισμός

### Χρήση των κυψελίδων:



1 Τοποθετήστε τη βάση κυψελίδας στον αναλυτή σας


2 Αφαιρέστε την ταινία σφράγισης από τη βάση κυψελίδας

## Περιβαλλοντικές συνθήκες

Θερμοκρασία αποθήκευσης	0 – 45°C
Θερμοκρασία μεταφοράς	-25°C – 60°C
Υγρασία κατά τη μεταφορά	20 – 80 %
Συνθήκες χειρισμού	Σύμφωνα με τις συνθήκες του αναλυτή σας

## ⚠ Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις













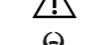
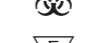




- Μην αποθηκεύετε τις κυψελίδες σε άμεσο ηλιακό φως
- Μην αφαιρείτε την ταινία σφράγισης από τη βάση κυψελίδας προτού την εγκαταστήσετε στον αναλυτή σας
- Μην αφαιρείτε τις μερικώς γεμάτες βάσεις κυψελίδων από τον αναλυτή σας
- Κάθε κυψελίδα είναι μίας χρήσης, ποτέ δεν πρέπει να εκτελείτε μια δοκιμασία με κυψελίδα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί
- Επειδή τα ούρα είναι υγρό ανθρώπινης προέλευσης, ενδέχεται να είναι μολυσματικό και να συνιστά δυνητικό βιολογικό κίνδυνο
- Να χειρίζεστε τις κυψελίδες UriSed και τις μολυσματικές ουσίες ούρων με προσοχή
- Να απορρίπτετε τα απόβλητα σύμφωνα με τις αποδεκτές εργαστηριακές οδηγίες και διαδικασίες.
- Επικοινωνήστε με τον διανομέα σας για να διασφαλίσετε ότι οι κυψελίδες που θα παραγγείλετε είναι συμβατές με τον συγκεκριμένο αναλυτή σας
- Να χρησιμοποιείτε τις κυψελίδες πριν από την ημερομηνία λήξης

 Ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης του αναλυτή σας για λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή δείγματος, τα πιθανά προκαταρκτικά βήματα, τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων, τα χαρακτηριστικά ανάλυσης και απόδοσης, τις παρεμβολές, τους περιορισμούς, τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, τις συγκεκριμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

## Αναφορά συμβάντων

Να αναφέρετε οποιαδήποτε σοβαρά συμβάντα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος στον αντιπρόσωπο σέρβις της 77 Elektronika στην περιοχή σας και στην τοπική αρμόδια αρχή.

## Σύμβολο:

	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής
	In vitro διαγνωστική ιατροτεχνολογική συσκευή
	Αριθμός καταλόγου
	Αριθμός παρτίδας
	Η σήμανση CE προσδιορίζει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
	Χρήση έως
	Όριο θερμοκρασίας
	Κατασκευαστής
	Φυλάσσετε μακριά από το ηλιακό φως
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Όριο υγρασίας
	Προσοχή
	Βιολογικοί κίνδυνοι
	600 Το περιεχόμενο αρκεί για 600 δοκιμασίες
	ΜΗΝ επαναχρησιμοποιείτε
	Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
	Αγγλικά
	Αριθμός παρτίδας

## Ιστορικό έκδοσης

Έκδοση	Ημερομηνία	Αλλαγές
3	25.03.2022	Ενημέρωση της συμμόρφωσης με την οδηγία περί ιατροτεχνολογικών συσκευών (IVDR)
2	25.11.2020	Γενική ενημέρωση του περιεχομένου
1	17.02.2009	Πρώτη κυκλοφορία

## Κατασκευαστής:

**77 Elektronika Kft.**  
98. Fehérvári út, 1116 Budapest  
ΟΥΓΓΑΡΙΑ  
www.en.e77.hu  
sales@e77.hu  
Τηλ.: + 36 1 206 - 1480  
Φαξ: + 36 1 206 - 1481