

# UriSed Kivete

REF

URS-9961HU  
URS-9961-1  
URS-9971  
URS-9972  
URS-9974  
URS-9961CH-1  
URS-9971CH

## Instrukcije za uporabu

Namjenska uporaba:

UriSed kivete su jednokratno uporabive polikarbonatne posude za uzorke korištene pri analizi necentrifugiranih, humanih urinskih uzoraka s UriSed analizatorom uzoraka. Namijenjene za profesionalnu, laboratorijsku uporabu. Namijenjene za in vitro dijagnostičku uporabu.

Načela testa:

UriSed Kivete su posude za uzorke što omogućuju mikroskopsku analizu urinskih uzoraka.


Uključeni materijali:

600 kiveta u 12 držača kiveta s po 50 kiveta u svakom

Neuključeni materijali:


- Kompatibilni sedimentni analizer urina (UriSed, UriSed2, UriSed 3, UriSed 3 PRO, UriSed mini)
- Generalna laboratorijska oprema

Način uporabe kiveta:

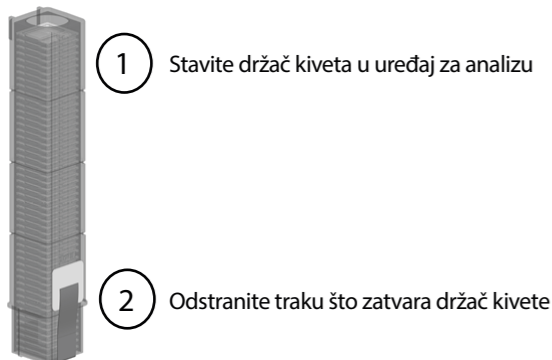


Uvjeti okruženja

Temperatura skladištenja	0 – 45°C
Transportna temperatura	-25°C – 60°C
Transportna vlaga zraka	20 – 80 %
Radne kondicije	Ovisno o kondicijama vašega analizacijskog uređaja

 Upozorenja i mjere opreza

- Ne izlagajte kivete izravnomu utjecaju suncat
- Ne skidajte traku za zatvaranje s držača kiveta prije stavljanja u analizacijski uređaj
- Ne vadite djelimično pune držače kiveta iz analizacijskog uređaja
- Svaka kiveta je za jednokratnu uporabu, nikada ne radite test s prije već korištenom kivetom
- Pošto je urin tekućina ljudskog podrijetla, ona može biti infektivna i značiti potencijalni biološki rizik
- Korištenim UriSed kivetama i urinskim kontaminatima rukujte oprezno
- Odlaganje otpada prema primjenjivanim laboratorijskim propisima i instrukcijama.
- Kontaktirajte svoga distributera kako biste bili sigurni da su naručene kivete kompatibilne s vašim analizacijskim uređajem
- Kivete koristite prije silaska uporabnog roka

 Pročitajte instrukcije korištenja svoga analizacijskog uređaja radi detalja o uzimanju uzoraka, propisanim koracima preparacije, vrednovanja rezultata, analitičkih i izvršnih karakteristika, interferencija, limitacija, procedura provjere kvalitete, specifičnih upozorenja i mjera opreza.

Dojava incidenata


Javite svaki teži incident što se dogodio pri korištenju ovoga proizvoda vašem 77 Elektronika servisnom zastupniku te vašoj lokalnoj nadležnoj službi.

Simboli:

-  Jedinstvena identifikacija uređaja
-  In vitro dijagnostički medicinski uređaj
-  Kataloški broj
-  Lot broj
-  CE oznaka znači da je proizvod sukladan direktivama  
Europske unije
-  Uporaba s
-  Granične vrijednosti temperature Limitacije
-  Proizvođač
-  Ne izlagati izravnom utjecaju sunca
-  Konzultirajte se o instrukcijama korištenja
-  Granične vrijednosti vlažnosti zraka
-  Upozorenja
-  Biološki rizici
-  600 Sadrži količinu dovoljnu za 600 testova
-  NE koristite višekratno
-  Ne koristite ako je pakiranje oštećeno
-  Hrvatski jezik
-  Broj grupe

Vremenski tijek verzije

Verzija	Datum	Promjene
3	25.03.2022.	Ažuriranje IVDR sukladnosti
2	25.11.2020.	Generalna ažuracija sadržaja
1	17.02.2009.	Prvo izdanje

 Proizvođač:

77 Elektronika Kft.  
98. Fehérvári út, 1116 Budapest  
HUNGARY  
www.en.e77.hu  
sales@e77.hu  
Tel: + 36 1 206 - 1480  
Fax: + 36 1 206 - 1481