

UriSed küvetta

REF

URS-9961HU
URS-9961-1
URS-9971
URS-9972
URS-9974
URS-9961CH-1
URS-9971CH

Használati utasítás

A termék rendeltetése:

Egyszer használatos, polikarbonát mintatartó, amely centrifugálatlan, humán vizelet minták mikroszkópos elemzéséhez használható UriSed üledékmérő készülékkel. Professzionális felhasználásra szánt, in vitro diagnosztikai eszköz.

Mérési elv:


Az Urised küvetta olyan mintatartó, amely lehetővé teszi vizelet és test folyadék minták mikroszkópos vizsgálatát UriSed automata vagy félauto-mata készülékekben.

A gyártó által biztosított anyagok
600 db küvetta 12 db küvettatárban

További szükséges (de a csomagolásban nem található) anyagok és eszközök


Kompatibilis vizelet üledék analizátor (UriSed, UriSed 2, UriSed 3, UriSed 3 PRO, UriSed mini)

Küvetta használata

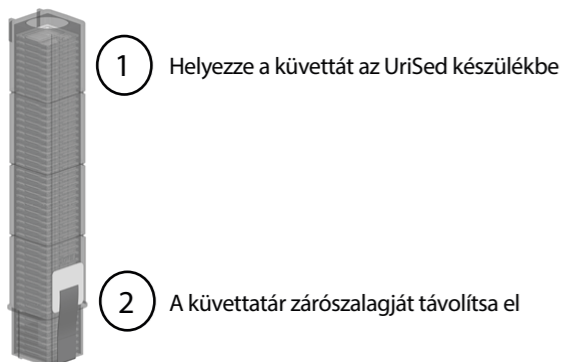


Tárolási, szállítási és felhasználási körülmények

Tárolási hőmérséklet	0 – 45°C
Szállítási hőmérséklet	-25°C – 60°C
Szállítási páratartalom	20 – 80 %
Felhasználási körülmények	A vizelet üledék analizátorban foglaltak szerint

 Óvintézkedések és figyelmeztetések

- Ne tárolja a küvettákat közvetlen napfénynek kitett helyen
- Ne vegye le a küvettatár zárószalagját mielőtt a készülékbe helyezné
- Csak teljesen üres küvettatárakat vegyen ki a készülékből
- Mindegyik küvetta kizárólag egyszer használatos; soha ne végezzen vizsgálatot használt küvétával
- A veszélyes vagy biológiailag szennyeződött anyagokat az intézményben elfogadott gyakorlatnak megfelelően kell ártalmatlanítani
- Keresse fel a termék forgalmazóját, hogy meggyőződjön arról, hogy készülékével kompatibilis küvétát rendel
- Ügyeljen arra, hogy a felhasználási időn belül használja fel a küvétát.

 A mintagyűjtéssel, előkészítési lépésekkel, eredmény számolással, analitikai és teljesítőképességi karakterisztikákkal, interferenciákkal, limitációkkal, a minőségellenőrzés lépéseivel, egyéb készülék specifikus óvintézkedésekkel és figyelmeztetésekkel kapcsolatban olvassa el készülékének használati utasítását.

Az eszközzel kapcsolatosan előforduló bármiféle komolyabb incidenst jelenteni kell a gyártónak és azon Tagállam illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg telephelye található.

Szimbólumok

-  Egyedi Eszközzazonosító
-  In vitro diagnosztikai eszköz
-  Referencia szám
-  Lot szám
-  A termék megfelel az Európai Unió vonatkozó irányelveinek
-  Felhasználási idő
-  Tárolási hőmérséklet
-  Gyártó neve és székhelye
-  Napfénytől óvva tárolandó
-  Olvassa el a használati utasítást
-  Páratartalom korlátozás
-  Fontos biztonsági tudnivalókról tájékoztatja a felhasználót, például figyelmeztetésekről és óvintézkedésekről
-  Biológiai kockázat
-  600 Az elvégezhető vizsgálatok száma
-  A termék nem újrahasznosítható
-  Ne használja a terméket sérült csomagolás
-  Magyar nyelv
-  Belső gyártási azonosító

Verziók

Verzió	Dátum	Változások
3	2022.03.25	IVDR megfelelés revíziója
2	2020.11.25	Általános revízió
1	2009.02.17	Első kiadás

 Gyártó:

77 Elektronika Kft.
98. Fehérvári út, 1116 Budapest
HUNGARY
www.en.e77.hu
sales@e77.hu
Tel: + 36 1 206 - 1480
Fax: + 36 1 206 - 1481