

Urised cuvetten

REF

URS-9961HU
URS-9961-1
URS-9971
URS-9972
URS-9974
URS-9961CH-1
URS-9971CH

Gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik:

Urised Cuvetten zijn wegwerpbare, single use polycarbonaat monster recipiënten die worden gebruikt om niet-gecentrifugeerde, menselijke urinemonsters te analyseren met Urised sedimentanalyzers. Het is bedoeld voor professioneel gebruik in laboratoria. Het is bedoeld voor in-vitrodiagnostiek.

Testprincipe:

Urised Cuvettes zijn monsterrecipiënten die microscopische analyse van urinemonsters mogelijk maken.


Verstekte materialen:

600 cuvetten in 12 cuvettehouders van elk 50 cuvetten

Materialen niet verstrekt:


- Compatibele urinesedimentanalyser (UriSed, UriSed2, UriSed 3, UriSed 3 PRO, UriSed mini)
- Algemene laboratoriumapparatuur

Cuvetten gebruiken:

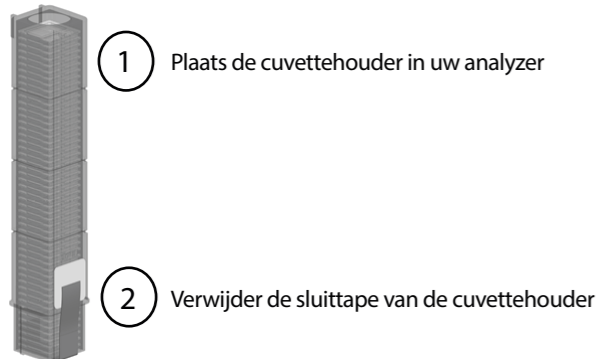

Omgevingscondities

Opslagtemperatuur	0 – 45°C
Transporttemperatuur	-25°C – 60°C
Transportvochtigheid	20 – 80 %
Bedrijfsomstandigheden	Volgens de omstandigheden van uw analyzer

 Waarschuwingen en waarschuwingen

- Bewaar cuvetten niet in direct zonlicht
- Verwijder geen sluittape van de cuvettehouder voordat u deze in uw analyzer installeert
- Verwijder geen deels gevulde cuvettehouders uit uw analyzer
- Elke cuvette is voor eenmalig gebruik, voer nooit een test uit met een eerder gebruikte cuvette
- Aangezien urine een vloeistof van menselijke oorsprong is, kan het besmettelijk zijn en een potentieel biologisch risico vormen
- Ga voorzichtig om met gebruikte Urised cuvetten en urineverontreinigingen
- Afval afvoeren volgens geaccepteerde laboratoriuminstructies en -procedures.
- Neem contact op met uw distributeur om ervoor te zorgen dat de door u bestelde cuvetten compatibel zijn met uw specifieke analyzer
- Gebruik cuvetten voor de vervaldatum



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw analyzer voor meer informatie over het verzamelen van monsters, mogelijke voorbereidende stappen, resultaatberekening, analytische en prestatiekenmerken, interferenties, beperkingen, kwaliteitscontroleprocedures, specifieke waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

Incident melden

Meld eventuele ernstige incidenten die zich kunnen voordoen bij het gebruik van dit product aan uw 77 Elektronika-servicevertegenwoordiger en uw lokale bevoegde autoriteit.

Symbolen:

-  Unieke apparaat-ID
-  Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek
-  Catalogusnummer
-  Lotnummerr
-  De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de toepasselijke richtlijnen van de Europese Unie
-  Gebruiken vóór
-  Temperatuurbeperving
-  Fabrikant
-  Uit de buurt van zonlicht houden
-  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
-  Vochtigheidsbeperking
-  Waarschuwing
-  Biologische risico's
-  Inhoud voldoende voor 600 tests
-  NIET hergebruiken
-  Niet gebruiken als verpakking is beschadigd
-  Nederlandstalig
-  Batch nummerr

Versiegeschiedenis

Versie	Datum	Veranderingen
3	2022.03.25	IVDR-compliance-update
2	2020.11.25	Algemene update van de inhoud
1	2009.02.17	Eerste release

 Fabrikant:

77 Elektronika Kft.
98. Fehérvári út, 1116 Budapest
HONGARIJE
www.en.e77.hu
sales@e77.hu
Telefoon: + 36 1 206 - 1480
Telefax: + 36 1 206 - 1481